

TRIADEO

グローブボックスのニオイ対策

グローブボックスの硫化水素対策


- 硫化水素や有機溶剤のニオイを放出させない
- 簡単接続（NW25）、お客様にて取付け可能
- 吸着剤の交換もお客様にて可能
- 電源不要

用途

- 硫化物系固体電解質
- 電極材料
- 全固体電池の組立
- 全固体電池の解体
- 電池ストレス試験
- 電池分析



* お客様排気設備に接続ください

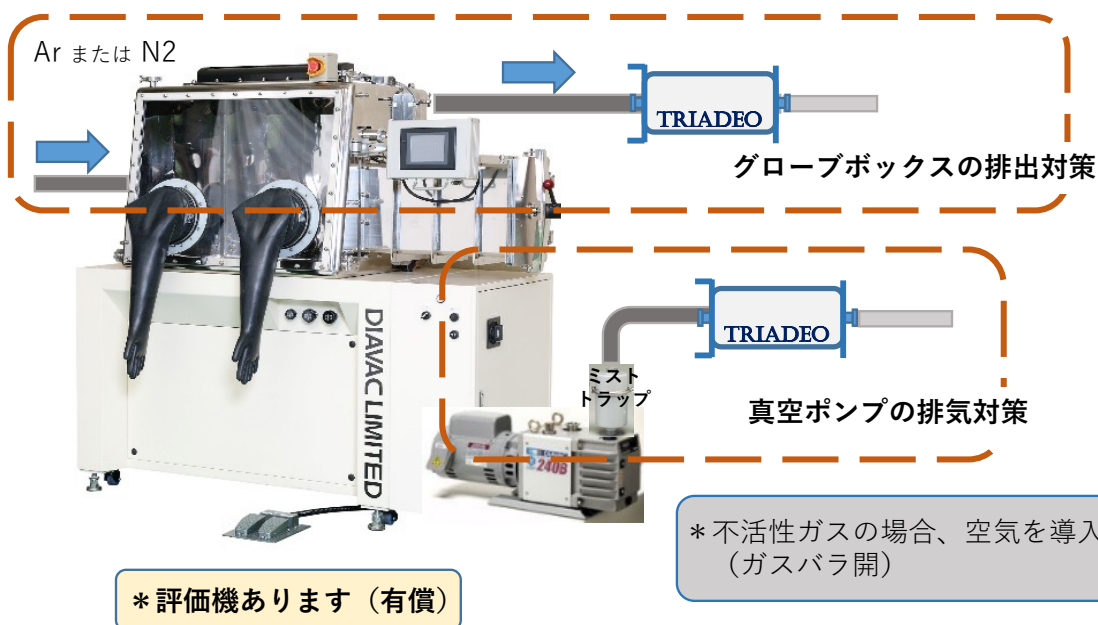

グローブボックスの排気側トラップ

ShinMaywa
Group


TRIAD E O

仕様	
処理風量	270L/min以下 (0.27m ³ /min以下)
質量	7.0 kg (内吸着剤 約2kg)
サイズ	W190×H190×L320
電源	不要


オプション
NW25クランプ
NW25センタリング
NW25フレキシブルチューブ (500mm、750mm、1000mm)

- ✓ 平衡吸着量：
硫化水素ガス5ppmに対して30wt%
- ✓ KTS3000-A/B (硫化水素/有機溶剤)
お選びください。

真空ポンプの排気対策による効果予測

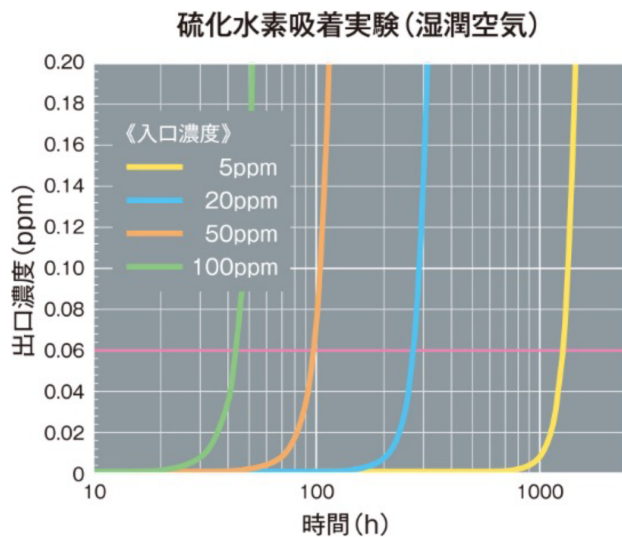

グローブボックスの排出対策による効果予測

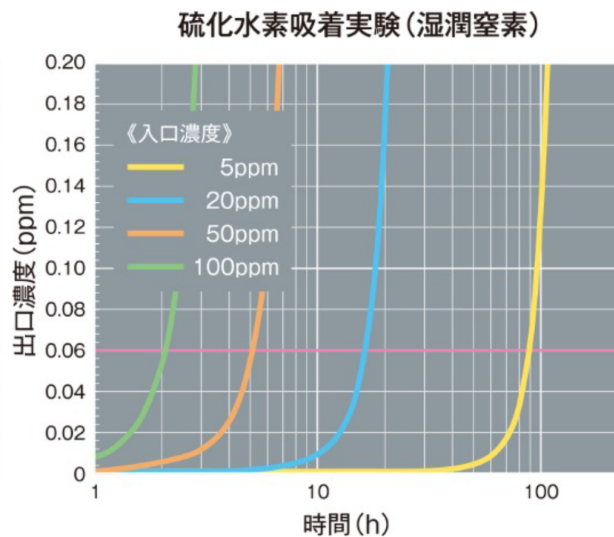

- ✓ 評価機あります (有償)
- ✓ 弊社営業部までお問合せください。